




## החזרה פנימית מלאה

הערות למורה ולצוות הטכני

### רשימת הציוד

- פנס לייזר עם "רגל" (בהספק של 1 mW או פחות)
- צלוחית מחומר אטום עם סרגל המודבק על קרקעיתה
- מיכל עם כ-100 סמ"ק של מים
- משורה בנפח של 10 סמ"ק
- פיפטה
- מחבר לשולחן
- מחבר זוויתי
- מוט באורך של כ-300 ס"מ

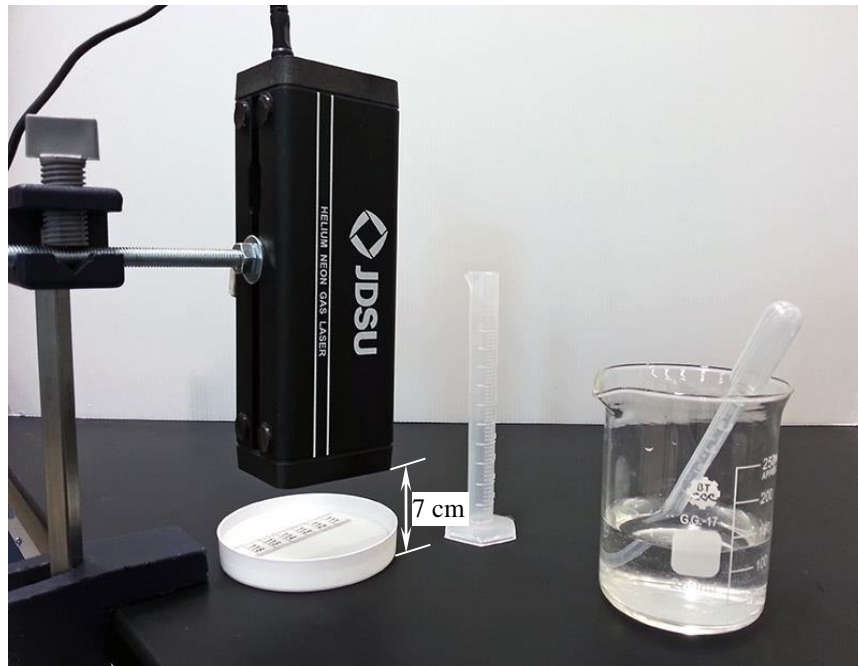

### הוראות להכנת המערכת

1. התקן את פנס הלייזר על שפת השולחן בגובה של כ-7 ס"מ מפני השולחן (ראה תמונת המערכת)
2. מדוד בקליבר את הקוטר הפנימי של הצלוחית (דייק עד כדי עשרוניות של מילימטר) ורשום אותו על דופן הצלוחית בטוש לא מחיק.